


PROTECTOR DE OJOS DE BISMUTO

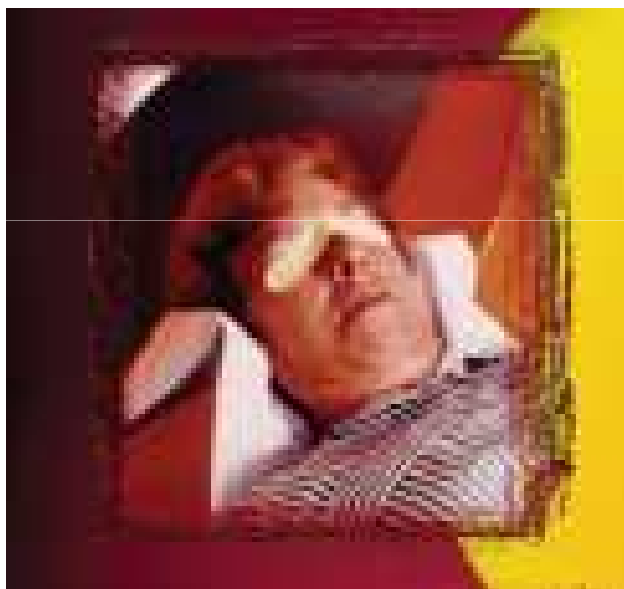

REF. PRO-OB

Protector de ojos para TAC

Diseñado para su uso en TAC's craneales y de cara, el protector ocular se encaja sobre el puente nasal con las porciones protectoras del ojo colocadas suavemente sobre los ojos del paciente.

Ninguna parte del protector cubre la zona ósea del anillo orbital puesto que de otra forma aparecerían artefactos en la imagen. El material adhesivo asegura un sellado adecuado sin burbujas de aire. Este protector, cuando es usado en TAC's craneales y faciales, siendo cortado en un grosor de 4 capas, permitiendo una reducción de dosis en los ojos de hasta un 40%.

El protector es de **un solo uso** puesto que las lágrimas son un eficiente transporte de bacterias y virus.