


PROTECTOR DE TIROIDES DE BISMUTO

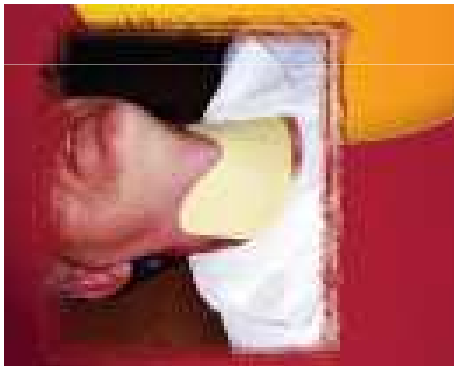

REF. PRO- TB

Colocado sobre la nuez de Adán, el protector de tiroides está diseñado para proporcionar la máxima protección para la muy radiosensible glándula tiroide. Para asegurar la correcta colocación, una marca curva en el centro del protector se coloca sobre la parte superior del esternón. Un adhesivo en la parte trasera mantiene el protector en un sitio mientras el paciente respira y traga. La forma alargada de corbata de pajarita asegura la protección incluso en pacientes con cuellos más grandes de lo normal o glándulas tiroides de tamaño superior al normal. Este protector cuando es usado para los tejidos blandos del cuello, viene cortado a un grosor de 4 capas, permitiendo una reducción de dosis en el tiroide de hasta un 60%.