


PANTALLA SOBREMESA MRP-PAVL

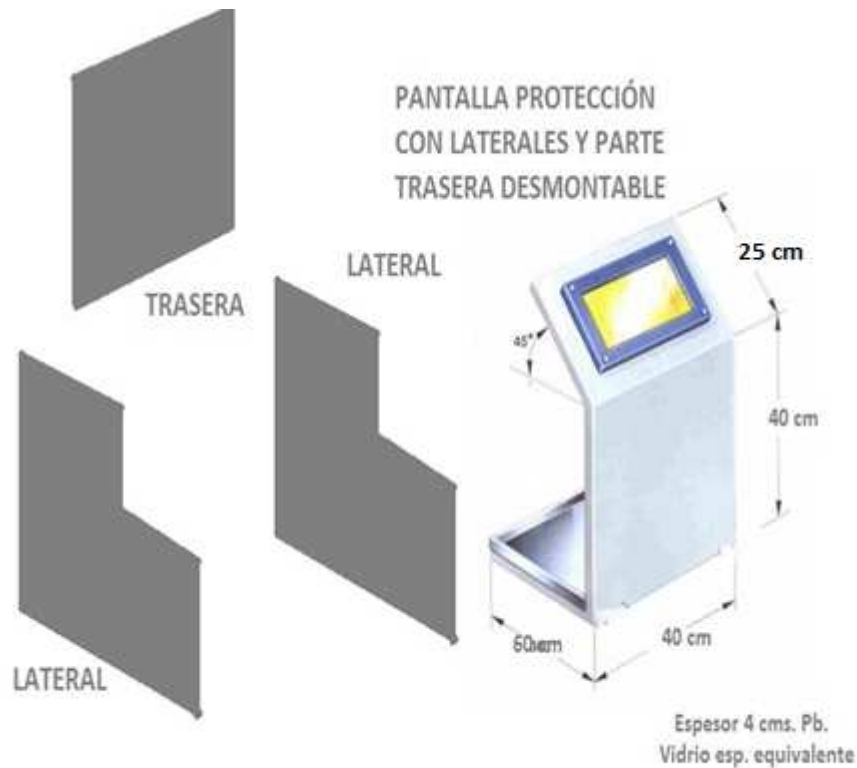

PANTALLA SOBREMESA PROTECCIONES LATERALES Y TRASERA

Formada por conformado diédrico, para ubicar en Mueble-poyata,

Las dimensiones son de 40 cms.de ancho x 40 cms + 25 cms. Alto. 60 cms. Fondo . En la meseta de apoyo en el plano horizontal, sin huecos ni recobecos, posibilidad total de eliminar cualquier derrame.

Espesor de blindaje 4 cms de plomo.

Con una ventana con vidrio plomado de espesor equivalente a la protección de la Pantalla, permite visualizar el área posterior en su meseta de manipulación.

Material Plomo extrusionado para evitar poros y recubierto en acero para evitar siempre estar en contacto con el Plomo, con pintura color a definir y exterior visto al "clorocaucho".

SIN RANURAS
DESMONTABLE PARA DESPLAZAR
MATERIALES DE 1ª CALIDAD
POSIBILIDAD ACERO INOXIDABLE (OPCION)